

S2BW

Kiváló F/F teljesítmény,
Color Doppler kompatibilitás



SonoScape
Caring for Life through Innovation

S2BW

Kiváló F/F teljesítmény, Color Doppler kompatibilitás

A SonoScape fejlett képalkotó technológiáival és optimális munkafolyamatával felruházott S2BW több, mint egy új kompakt, hordozható fekete-fehér ultrahang funkciók széles körével. A valóban kivételes képminőséggel kombinált professzionális diagnosztikai alkalmazások és az ergonomikus kialakítás friss élménnyel szolgál Önnek is: megbízhatósággal, pontossággal és kényelemmel. Az S2BW Color Doppler készülékké bővíthető, így a jövőben még több területen használhatóvá válik.



Saját munkastílusra szabható kialakítás: egyéni adattáblázatok/grafikonok, funkcióbillentyűk, ikonok, formulák, mérések, leletelrendezések stb.



Transzducerek széles választéka: konvex, mikro-konvex, phased array, lineáris, hüvelyi, transzrektális, intraoperatív, térfogati stb.




Alkalmazások széles köre: Hasi, szülészeti-nőgyógyászati, kardiológiai, urológiai, érrendszeri, ortopédiai illetve ICU, sürgősségi, anesztéziái és váz- és izomrendszeri.



Teljes körű adatbáziskezelő megoldások: DICOM3.0, AVI/JPG, USB2.0, HDD stb.




Beépített nagykapacitású Li-ion akkumulátor

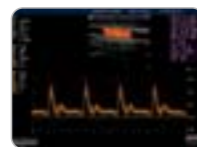


Color Dopplerre bővíthető

Fejlett képalkotó technológiák


Az S2BW fejlett technológiák egész sorozatával biztosítja a kiváló képminőséget bármilyen klinikai alkalmazás számára.

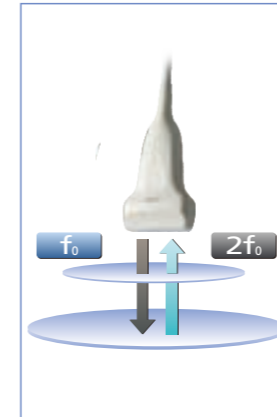

THI (tissue harmonic imaging – szövet-harmonikus képalkotás): Javított kontraszt és oldalirányú felbontás, zaj-, interferencia és artifacts (side lobes, visszhang) csökkentés, javított jel-zaj arány.

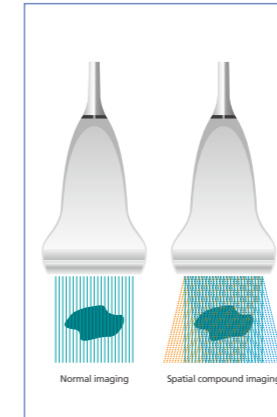

Térbeli összetett képalkotás: a szemcsézettség és az akusztikai melléktermékek csökkentése, a kontrasztfelbontás és a szövetek megkülönböztetésének javítása.

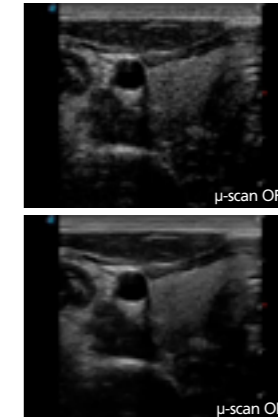


μ-scan (szemcssecsökkentő képalkotás): zajszint csökkentése, szövethatárok kiemelése, térbeli felbontás javítása.




Panoráma képalkotás: lehetővé teszi a nagy szervek valós idejű, kiterjesztett területű megjelenítését, melyek egyetlen képen általában nem látszódnak.



4D képalkotás

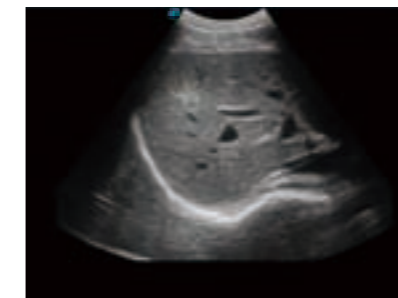

Máj angioma

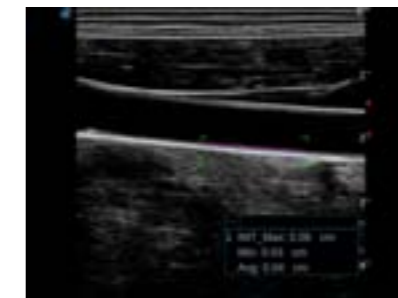


Carotis IMT




Medián-sagittális méh



LV hossz tengelye

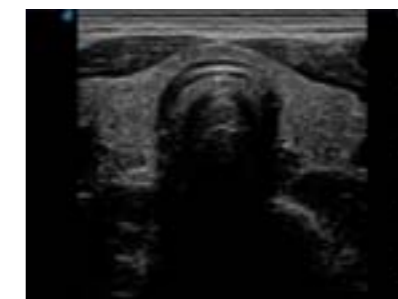

Pajzsmirigy

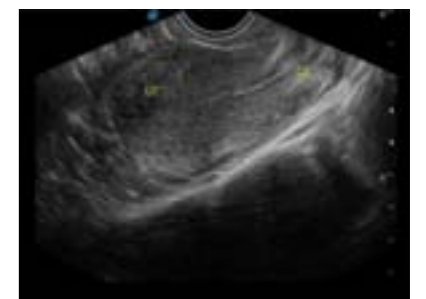

Méh

Cégismertető

A SonoScape a megalapításától kezdve elkötelezte magát a kiváló minőségű orvostechnikai készülékek mellett az emberi egészségügy részére. A SonoScape ultrahang készülékek gyártására valamint fejlesztésére specializálódott. A SonoScape korszerű képalkotó technikák bevezetésével folyamatosan növeli a diagnosztikai pontosságot és ennek hála jobb egészségügyi eredmények érhetőek el. 2002 óta a SonoScape termékeinek tudásából emberek milliói részesültek több, mint 100 országban világszerte. A SonoScape az állandó innováció és az élet iránti szenvedély révén továbbra is törekedni fog a még hatékonyabb és mindenki által elérhető egészségügyi megoldások nyújtására.

Idézet a elemzőjétől

“A SonoScape kivételes vállalkozói képességekről tett tanúbizonyságot. ... A cég elsődleges törekvését, hogy termékkínálata kiemelkedő minőségét megőrizze, az ultrahang készülékek vásárlás utáni elhanyagolható költségei is támogatják. A hordozható, több területen alkalmazható SSI-1000 ultrahang bevezetésével a SonoScape szintén jelentős lépést tett afelé, hogy globális orvosi műszer gyártóvá váljon.”

Mr.Krishanu Bhattacharjee

Mérföldkövek a cég életében

- 2002: cégalapítás
- 2003: a világ első 15"-os LCD hordozható színes doppler készüléke
- 2004: az első PC alapú színes doppler készülék Kínában
- 2005: kormányzati elismerés mint csúcstechnológiájú cég
- 2007: „Kínai Top Márka” díj az orvostechnológiai gyártók között
- 2007: első valós idejű 4D technológia Kínában
- 2008: „Európai Vállalkozói Cég 2008” díj a FROST & SULLIVAN-tól
- 2008: kínai „Zászlóshajó” díj az orvostechnológiai iparban
- 2009: „Termékminőség Vezető” díj a FROST & SULLIVAN-tól
- 2011: reddot dizájn díj győztes



SonoScape

CSM-Medical Kft. | Tel.: +36 30 782 7712 | Fax: +36 1 228 9852
Email: uh@csm-medical.hu
www.sonoscape.hu